



Le cathéter de PIU Koala est compatible avec les moniteurs foetaux des plus grandes marques. Cet outil est conçu pour vous aider à identifier le moniteur foetal utilisé et à commander le câble approprié à des fins de mise en service ou d'évaluation.

Les câbles les plus couramment utilisés avec le Koala sont les **câbles IPC-5014 de GE Medical (Corometrics), Philips IPC-5080 et Philips IPC-5012.**


### IPC-5014



Compatible avec les moniteurs  
**GE Corometrics 250cx**



### IPC-5080

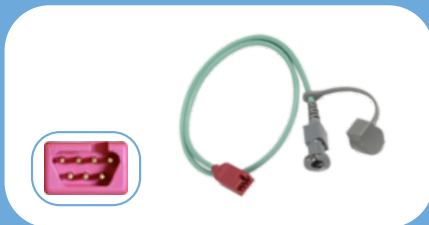

Compatible avec les moniteurs **Philips Avalon**



**FM50**

**FM30**

Pour rappel, lors de la mise à zéro du transducteur quand le **moniteur Philips Avalon est utilisé**, le cathéter doit être déconnecté du câble et non le câble de son adaptateur.

### IPC-5012



Compatible avec  
**tous les autres moniteurs Philips**





# GUIDE DE CHOIX DES CÂBLES KOALA

## IPC-5016

Compatible avec les moniteurs **AMS Medical Spacelabs 94000**



## IPC-5090

Compatible avec les moniteurs **EDAN Instruments**



Le cathéter Koala est le seul capteur de pression intra-utérine sans composant électronique.  
Le transducteur externe permet de calibrer facilement le zéro absolu in utero.

### Informations pour la commande

Description du produit	Référence	Qté/boîte	Câbles du moniteur	Référence	Qté/boîte
Cathéter de pression intra-utérine Koala	IPC-5000E	10/boîte	Philips 8040A (40 VV/mmHg)	IPC-5018	1 câble
			Philips Avalon	IPC-5080	1 câble
			Tous les autres moniteurs Philips	IPC-5012	1 câble
			Tous les modèles GE Medical (Corometrics)	IPC-5014	1 câble
			Air-Shields (Littton) Fetascan 1400	IPC-5016	1 câble
			Spacelabs Medical (AMS) Spacelabs 94000	IPC-5050	1 câble
			Neovent Medical Stan S31	IPC-5060	1 câble
			Edan Instruments, Inc.	IPC-5090	1 câble

Consulter le mode d'emploi pour les instructions complètes, les avertissements, les précautions et les contre-indications les contre-indications

Votre distributeur local:

[clinicalinnovations.fr](http://clinicalinnovations.fr) | [clinicalinnovations.com](http://clinicalinnovations.com)

MVF | Clinical Innovations  
ZA du Serroir - CS 40034  
Lay Saint Christophe, 54690  
Téléphone +33 (0) 3 83 22 20 76 | Fax +33 (0) 3 83 22 65 67  
dms@mvf.fr

© Clinical Innovations, LLC. Tous droits réservés. | ART-0239 Rev. 01



A CLINICAL INNOVATIONS COMPANY