



De Koala IU[®]PC is geschikt voor alle foetale monitors van de bekende merken. Met dit hulpmiddel kan worden bepaald welke foetale monitor wordt gebruikt, zodat de juiste kabels worden besteld voor gebruik of evaluatie.

De meest gangbare kabels die met de Koala worden gebruikt, zijn de **GE Medical (Corometrics) IPC-5014-kabel**, de **Philips IPC-5080-kabel** en de **Philips IPC-5012-kabel**.


IPC-5014



Compatibel met
GE Corometrics 250cx



IPC-5080

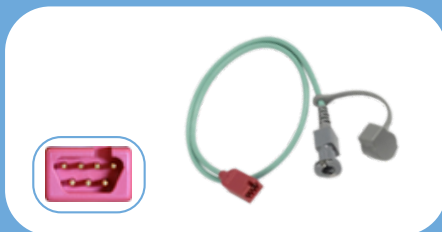

Compatibel met
Philips Avalon-monitors



Ter herinnering bij het op nul instellen van de transducer tijdens het gebruik van de **Philips Avalon-monitor**: de katheter moet worden losgekoppeld van de kabel, niet van de kabel van de adapterkabel.

IPC-5012



Compatibel met
Alle andere Philips-monitoren





KOALA-KABELHULPMIDDEL

IPC-5016




Compatibel met
Spacelabs Medical AMS 94000



IPC-5090



Compatibel met
EDAN-hulpmiddelen

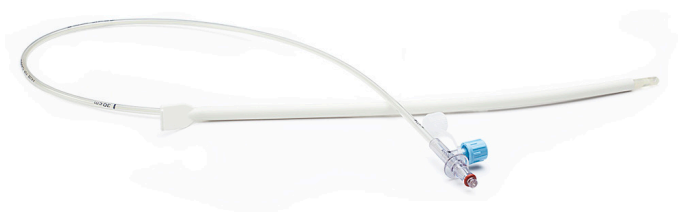

De intra-uteriene drukkatheter (IUPC) is de enige IUPC zonder elektronica in de katheter.

De externe transducer zorgt voor een eenvoudige, werkelijke nulstelling in utero.

Bestelinformatie

Productbeschrijving	Productcode	Aantal in doos	Monitorkabels	Productcode	Aantal in doos
Koala intra-uteriene drukkatheter	IPC-5000E	10 stuks	Philips 8040A (40 VV/mmHg)	IPC-5018	1 kabel
			Philips Avalon	IPC-5080	1 kabel
			Alle andere Philips-monitoren	IPC-5012	1 kabel
			GE Medical (Corometrics) alle modellen	IPC-5014	1 kabel
			Air-Shields (Littor) Fetascan 1400	IPC-5016	1 kabel
			Spacelabs Medical (AMS) Spacelabs 94000	IPC-5050	1 kabel
			Neovent Medical Stan S31	IPC-5060	1 kabel
			EDAN Instruments, Inc.	IPC-5090	1 kabel

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor volledige instructies, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties.

Plaatselijke distributeur:

clinicalinnovations.com

Clinical Innovations Benelux B.V.

Wijde Wade 3 | 3439 NP Nieuwegein | Nederland

Telefoon +31 (0) 30 310 04 69

info.europe@clinicalinnovations.com

© Clinical Innovations, LLC. Alle rechten voorbehouden. | ART-0240 Rev. 01

